

mindray
healthcare within reach

DC-8
Ультразвуковая
диагностическая система



mindray

Mindray is listed on the NYSE under the symbol "MR"

ООО МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС
123022, Москва, 2-ая Звенигородская ул., 13, стр. 41
Тел.: +7 499 5536036 Факс: +7 499 5536039
Телефон технической поддержки пользователей
8-800-333-53-23 (звонок по России бесплатный)
www.mindray.ru

ВДОХНОВЕНИЕ, ПРЕВОСХОДЯЩЕЕ ОЖИДАНИЯ



Последние десять лет мы непрерывно развивали линейку ультразвуковых сканеров Mindray. Мы внимательно прислушиваемся к клиентам и постоянно стремимся улучшать наши продукты, учитывая ваши потребности. Представляем новую модель DC-8, которая является олицетворением нашей упорной работы.

Именно ваши потребности были взяты за основу при разработке функционала и возможностей DC-8. Продвинутое качество изображения и эргономика — это те отличительные особенности, которые позволяют улучшить качество диагностики пациентов. Совмещая все эти характеристики в одном сканере, мы представляем вам современный инструмент для решения каждодневных задач.

Испытанные технологии

Превосходное качество изображения



Качество изображения стало основой построения нового DC-8. Мы разработали абсолютно новую платформу, которая, благодаря новым технологиям получения изображения и алгоритмам его обработки, способна адаптироваться к специфике каждого пациента. Всё это позволяет легко получать превосходное качество изображений в трудных и тяжелых для исследования случаях.



3T – новая технология производства датчиков

Уникальная технология Mindray, которая позволяет расширить частотный диапазон и уменьшить потери сигнала при передаче и, как следствие, улучшить соотношение сигнал/шум и разрешающую способность.

Теперь вы сможете:

- сканировать на более высокой частоте даже на больших глубинах
- быстрее и легче получать клинически достоверные изображения
- получать больше полезной информации при исследовании трудных пациентов

HR Flow инновационная технология, улучшающая в режиме ЦДК визуализацию мельчайших сосудов

как по отдельности, так и в комплексе. Благодаря реализованным в ней технологиям наша система способна:

- распознавать и визуализировать самые слабые потоковые сигналы
- обеспечивать высочайшее пространственное разрешение, не теряя при этом в чувствительности и проникающей способности


Ультра-широкополосная нелинейная обработка сигнала - новейшая запатентованная технология Mindray,

позволяющая улучшить контрастное разрешение. Применяя ультра-широкополосную передачу сигнала, система оперирует гармоническими и нелинейными фундаментальными сигналами, в результате получая:


- соотношение сигнал/шум на 20-30% лучше по сравнению с системами того же класса
- длину получаемого сигнала с повышенным разрешением на 20-30% выше для лучшей визуализации

Технология iClear высокой четкости: технология подавления паразитного шума улучшает контрастное разрешение и помогает при визуализации патологий.


iBeam – сложносоставное многолучевое сканирование комбинирует несколько изображений, полученных под разными углами. Результирующее изображение имеет более высокое контрастное разрешение и улучшенное качество визуализации.

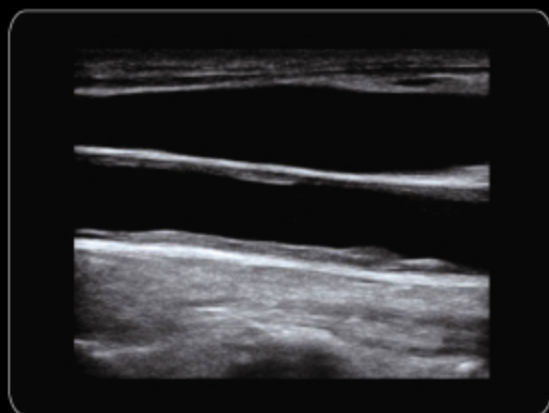


Атеросклероз ОСА

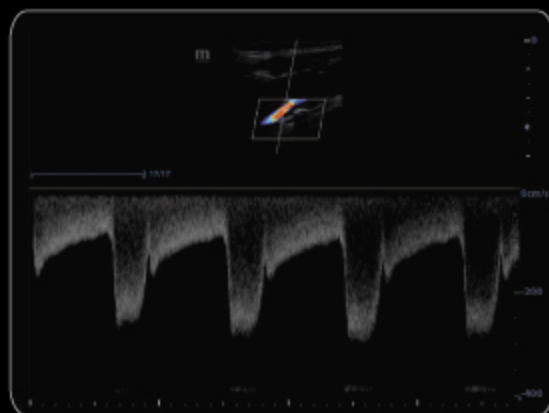

Атеросклероз ВСА

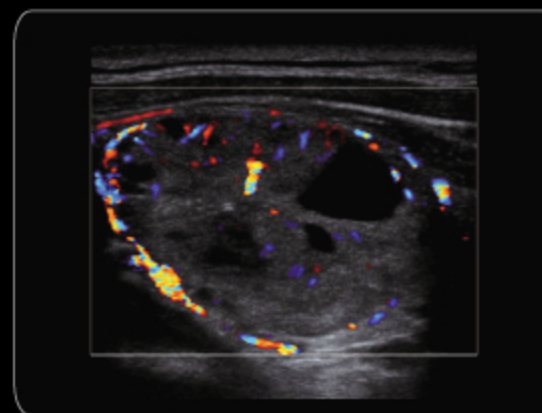

Образование в ЩЖ

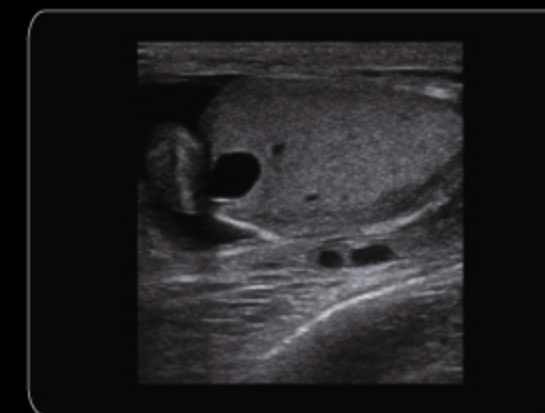


Образование в яичке

УВЕРЕННОСТЬ В ДОСТОВЕРНОСТИ



Асцит печени с плевральным выпотом

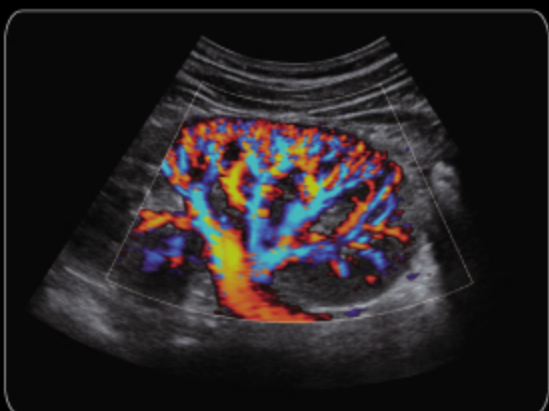

Количественный анализ в тканевом доплере




Лицо плода (28 недель)




Плод (14 недель)




Образование в яичнике

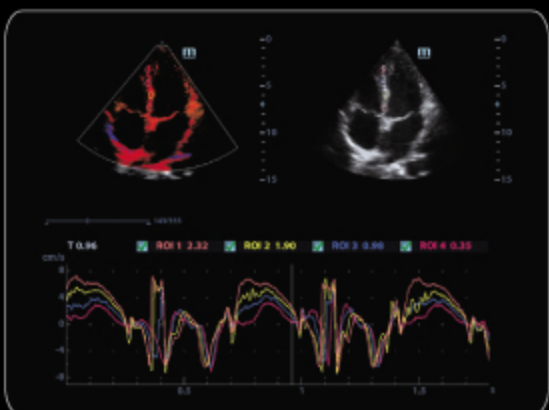

Количественный анализ в тканевом доплере

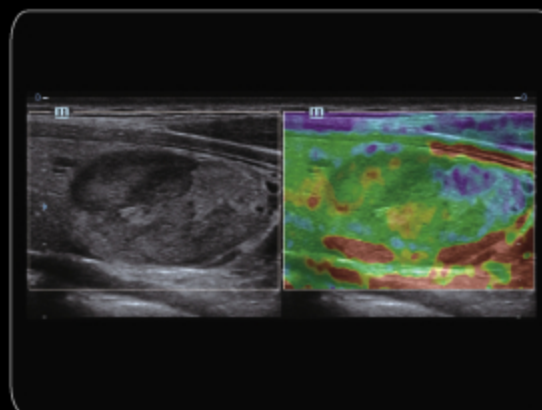

Эластография образования в МЖ

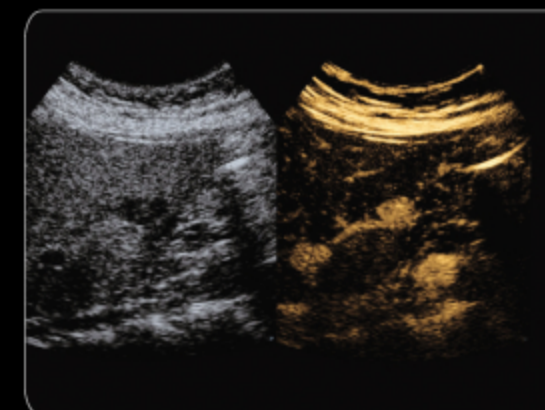

Образование в печени (с контрастированием)

ПОНИМАНИЕ КАК ТВОРЧЕСТВО



DC-8 предназначен для упрощения вашего рабочего процесса и уменьшения ежедневного напряжения. Новая платформа предоставляет большую гибкость при пост-обработке полученных данных благодаря технологии «сырых» данных. Данная технология позволяет достичь высокой производительности выполняемых исследований. В любой момент у вас есть возможность обрабатывать полученные ранее изображения для уточнения или корректировки диагноза.

Технология «сырых» данных – это мощный инструмент, позволяющий изменять:

- усиление, динамический диапазон, карты серого и шумоподавление iClear в B-режиме
- инверсию, карты раскрашивания и сглаживание в ЦДК
- усиление, базовую линию, угол, инверсию, пристеночный фильтр и скорость прокрутки в режиме спектрального доплера
- проводить любые измерения и редактировать комментарии

DC-8 даже может осмелиться подсказать вам следующий шаг. Интеллектуальная автоматизированная система ведения протокола исследования автоматически вставляет комментарии, вызывает необходимые измерения и даже больше. Всё это возможно благодаря модулю **iWorks**, в котором уже заложены стандартные протоколы проведения исследования. Кроме того, всегда существует возможность добавления и редактирования своих собственных протоколов.

iWorks позволяет больше сконцентрироваться на пациенте, не отвлекаясь на лишние действия и нажатия клавиш:

- автоматическое выставление параметров изменения изображения и режимов работы сканера
- автоматическая вставка комментариев
- автоматический вызов требуемых исследований
- создание собственных протоколов для нестандартных случаев



КОМФОРТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ



В нашей системе DC-8 мы постарались внедрить все возможные решения, чтобы сделать вашу работу на сканере комфортной каждый день. Новая форма панели и по-новому организованные органы управления делают DC-8 по-настоящему универсальным инструментом.

LCD монитор высокой четкости передает мельчайшие подробности, а режим полноэкрannого изображения iZoom облегчает оценку мелких структур. Полностью настраиваемый сенсорный командный экран значительно снижает время, затрачиваемое на поиск нужного инструмента – у вас всегда всё под рукой.



19ти дюймовый монитор высокой четкости

- более крупная исследуемая область снижает нагрузку на глаз
- широкие углы обзора позволяют удобно расположиться на рабочем месте

Поворотная консоль монитора

- легкое перемещение в любом направлении
- удобная складывающаяся конструкция

10,4 дюймовый сенсорный командный экран

- прямой доступ ко всем функциям и настройкам

Лёгкая в использовании панель

- настраиваемое положение и высота панели
- сгруппированные по функционалу органы управления
- специально разработанная «в форме почки» панель
- подогреваемый держатель для геля
- специализированный держатель внутрисполостного датчика